

надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.



Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести к сокращению срока службы изделия.

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.



По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания просим обращаться к дилеру, у которого приобретено изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел. (343) 383-11-95 (96).



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Опора для стояния ОС-211.1.

арт. 211.1.01., арт. 211.1.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.



Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для стояния ОС-211.1. изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефону : (343) 383-11-96, 383-11-95.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

Краткое описание и назначение

Принятие вертикального положения ребенком с ограниченными возможностями - это чрезвычайно важный элемент сложного процесса реабилитации. Опора для стояния - наклонный вертикализатор ОС-211.1. разработан для использования в процессе интенсивной и постоянной реабилитации детей, не имеющих возможности самостоятельно стоять и сидеть.

Техническое средство реабилитации опора для стояния ОС-211 «Я Могу!» - наклонный вертикализатор, на металлической колесной раме, предназначен для стояния и нахождения в наклонном положении детей с ограниченными возможностями, в том числе с ДЦП. Основное назначение : реабилитационные мероприятия, направленные на адаптацию ребенка к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов и систем к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела.

Рама изготовлена из металлического профиля с цветным порошковым покрытием, устойчивым к традиционным способам обработки. Снабжена 4 поворотными колесами с тормозами. Рама состоит из вертикальной регулируемой по высоте стойки и горизонтальной опорной рамы. Опорная рама имеет телескопическую выдвижную конструкцию.

Опора для стояния - наклонный вертикализатор ОС-211 «Я Могу!» снабжен механизмом изменения угла наклона с жестким закреплением выбранного угла.

Опорное ложе выполнено из высококачественной фанеры, покрытой экологически чистой смесью растительных масел с природным воском. Покрытие антиаллергенное, устойчивое к традиционным методам обработки. Мягкая обшивка выполнена из винилискожи, наполнение - поролон.

Крепление для стоп типа «сандалии» расположено на опоре для ног. Угол наклона опоры для ног изменяется с изменением угла наклона вертикализатора. Крепление обеспечивает регулировки положения стоп ног вперед-назад и влево-направо, разведение опор для ног в каждую сторону. Все регулировки - с жестким закреплением выбранного положения.

Коленные крепления расположены на коленной обойме, регулирующейся по высоте. Коленопоры с мягкой обшивкой, независимо регулируются по ширине.


Тазобедренное крепление на бедренной обойме, регулируемое по высоте и ширине, с мягкой опорой и боковой поддержкой. Грудное крепление на грудной обойме, регулируемое по высоте и ширине, с мягкой опорой и боковой поддержкой.

В комплект вертикализатора стойки входит стол для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте и углу наклона.



Все регулировки в процессе эксплуатации опоры ОС-211 «Я Могу!» выполняются без применения специального инструмента. Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности и периода использования принимает лечащий врач.

Опора для стояния ОС-210 «Я Могу!» выпускается в 2 размерах :
 арт.210.1.01 - для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, весом до 50 кг
 арт.210.1.02 - для детей школьного возраста, ростом до 165 см и весом до 75 кг.

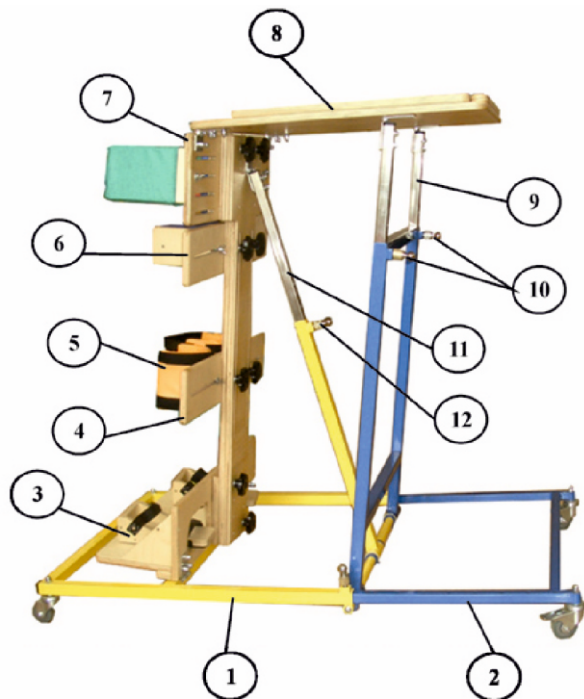

- 1 - металлическая колесная рама
- 2 - телескопическая составляющая рамы
- 3 - подножка
- 4 - коленная обойма
- 5 - коленопоры
- 6 - грудная обойма
- 7 - бедренная обойма
- 8 - столик
- 9 - стойки, регулирующие наклон и положение столика
- 10 - фиксаторы положения столика
- 11 - стойка наклона вертикализатора
- 12 - фиксатор положения вертикализатора

Требования к безопасности

Опора предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с непрочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.



Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности использования изделия, ни в коем случае не используйте опору.



В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: (343) 383-11-95 (96).

Технические характеристики



Опора для стояния ОС-211 «Я Могу!» поставляется в собранном, готовом к эксплуатации виде. Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие.

	210.1.01	210.2.02
Габаритные размеры (Д x Ш x В) в сложенном состоянии, мм	780 x 600 x 670	800 x 620 x 1040
Габаритные размеры (Д x Ш x В) в рабочем состоянии (выдвинута телескопическая составляющая рамы), мм:	1180 x 600 x 670	1180 x 620 x 1040
Колесная металлическая рама с 4 поворотными колесами с тормозами	наличие	наличие
Подножка с креплениями для стоп типа «сандалии» с задними упорами. Крепления для ступней независимо регулируются вперед-назад и вправо-влево.	наличие	наличие
Расстояние от пола до подножки, мм	140	140
Коленная обойма, регулируемая по высоте и расстоянию между коленопорами	наличие	наличие
Регулируемая высота коленной обоймы от подножки, в диапазоне, мм	190 - 510	230 - 580
Расстояние между коленопорами (по центральной оси коленопор), в диапазоне, мм	160 – 480	160 – 480
Регулировка высоты бедренной обоймы (от подножки), мм	310 - 610	400 - 610
Регулировка ширины бедренной обоймы (за счет регулировки бедренных упоров-ограничителей), мм	250 – 420	250 – 420
Регулировка столика по высоте (от подножек), мм	500 - 810	800 - 1120
Регулировка грудной обоймы по высоте (от подножек), мм	450 - 710	750 - 1020
Угол наклона вертикализатора, в диапазоне, градусов:	30 - 90	40 - 90
Угол наклона столика, в диапазоне, градусов	0 - 30	0 - 30

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину и необходимые крепления. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Опора нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и