

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.


Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парникова, 8-1
Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»
тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru

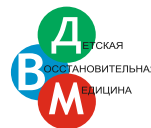

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон Опора для сидения ОС-008 «Зебра», арт. 008.1., арт. 008.2.

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.



Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для сидения ОС-008 «Я Могу!» («Зебра») изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПФ «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95, 383-11-96.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

Краткое описание и назначение

Опора для стояния и сидения ОС-009 «Зебра» предназначена для реабилитационных занятий с детьми с ограниченными возможностями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести, а так же для физиореабилитационных занятий и упражнений ЛФК.

Сидение в виде абдукционного валика, диаметром 20 или 30 см по выбору, регулируемое по высоте, со спинкой. Сидение может быть установлено с определенными углами наклона вперед-назад. Сидение установлено на вертикальных стойках, оснащенных колесами с тормозами. На стойках крепятся съемные подножки с креплениями для стоп типа «сандалии». Крепления для стоп имеют регулировки для наиболее удобного расположения ног ребенка. Съемная «голова зебры» может быть использована и как игрушка длявлечения внимания ребенка во время реабилитационных процедур, так и как валик для различных занятий и упражнений.

При помощи этой опоры детей учат вставать, садиться, удерживать равновесие, совершать различные движения ногами и т.д.

Опора поставляется в комплекте с приставной стойкой-лесенкой, которая используется для занятий ЛФК, а так же как дополнительная опора при упражнениях вставания.

Опора предназначена для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Максимальная нагрузка : 55 кг.

Варианты исполнения:

арт.008.1. - с диаметром валика 30 см

арт.008.2. - с диаметром валика 20 см



- | | |
|--|---------------------------|
| 1 - Лесенка | 2 - Основание лесенки |
| 3 - Сидение | 4 - Передняя стойка |
| 5 - Задняя стойка | 6 - Голова-валик |
| 7 - Опоры для ног | 8 - Крепления для ступней |
| 9 - Крепежные барашки для крепления и изменения угла наклона сидения | |

Технические характеристики

№ п/п	Характеристика	OC 008.1.	OC 008.2.
1.	Диаметр валика	30 см	20 см
2.	Высота верхней кромки валика над уровнем пола	15 - 30 см	20 - 40 см
3.	Регулировки валика	По высоте и углу подъема	
4.	Количество положений «по высоте»	6	
5.	Длина съемного валика – «мордочки»	30 см	
6.	Диаметр съемного валика – «мордочки»	20 см	
7.	Высота лестницы	100 см	
8.	Ширина лестницы	35 см	
9.	Количество перекладин	9	
10.	Вес ребенка	До 50 кг	

Комплектация

№ п/п	Описание	Количество
1.	Абдукционный валик-сидение	1 шт
2.	Передняя стойка с мягким элементом	1 шт
3.	Задняя стойка	1 шт
4.	Барашки крепежные	8 шт
5.	Съемный валик - мордочка	2 шт
6.	Съемные опоры для ног	2 шт
7.	Лесенка	1 шт

Подготовка и порядок эксплуатации

Опора OC-008 «Я Мору!» поставляется в транспортировочном виде. Для эксплуатации опоры необходимо присоединить к передней стойке голову-валик и опоры для ног (при помощи крепежных барашков).



Внимание! Решение по целесообразности использования, порядок использования оборудования, периодичность и интенсивность эксплуатации определяет лечащий врач!



Перед каждым использованием изделия, проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении повреждений и сомнений в возможности использования опоры, не используйте изделие.

Установить опору на ровную поверхность (пол). Придать опоре строго горизонтальное положение. Зафиксировать колеса тормозами. Отрегулировать валик для сидения (3) на определенную высоту. Для этого необходимо ослабить крепежные барашки (9) на передней и задней стойках, переустановить валик на необходимую высоту со стороны задней стойки, закрепить барашки, затем - со стороны передней стойки. Тщательно закрепить барашки. При необходимости установить опоры для ног (7) закрепить крепежными барашками, отрегулировать крепления для ступней (8). Высадить ребенка на опору так, чтобы стопы полностью опирались на поверхность пола, либо на опоры для ног.



Опора OC-008 «Зебра» поставляется без приспособлений для закрепления тела ребенка. При занятиях с использованием изделия не оставляйте ребенка без присмотра!

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией необходимо произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину и необходимые крепления. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в паспорте изделия (гарантийном талоне). При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам.

Изделие нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности.

Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.



Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести к сокращению срока службы изделия.