

TAKASIMA

ООО «Медберри»

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21, лит. А, оф. 508
Телефон: +7 (812) 385-57-66
125362, Москва, ул. Водников, 2, стр.4
Телефон: +7 (495) 215-14-90
E-mail: office-medberry@medberry.ru

Бесплатный звонок для абонентов РФ:
Телефон: 8 (800) 555-3-800

www.takasima.ru

TAKASIMA

Массажёр для ног RK-818

Руководство пользователя



www.takasima.ru

TAKASIMA

Массажёр для ног RK-818

Содержание

Меры безопасности	3
Комплектация массажера	4
Функции	5
Инструкция по эксплуатации	6
Способ использования.....	7
Снятие чехлов	8
Иллюстрации	9
Техническое обслуживание и хранение.....	10
Устранение неполадок и характеристики.....	11

Благодарим Вас за приобретение нашего массажера для ног.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Обратите внимание на знаки «Предупреждение» и «Внимание».

Предупреждение

Нельзя пользоваться массажером под каким-либо другим эл. напряжением, кроме указанного в инструкции	Использование иного напряжения может стать причиной несчастного случая
При отключении электричества	Выключите питание и извлеките вилку из розетки
Массажёр не работает	Извлеките вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр продавца
Вилка или шнур повреждены	Позвоните в сервисный центр и произведите замену

2 Руководство пользователя

Рекомендуем вам подключать электрическое оборудование

TAKASIMA

Массажёр для ног RK-818

Меры безопасности


Внимание

- Используйте массажёр не более 30 минут, более продолжительное использование может быть причиной перенапряжения мышц и ущерба нервной системы.
 - Не рекомендуется использовать массажер для ног без предварительной консультации врача:
 - Лицам, с установленным электрокардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
 - Лицам, имеющим многократные травмы спины.
 - Лицам, имеющим хрупкие кости скелета, в особенности позвоночника.
 - Лицам, недавно перенёвшим операцию.
 - Беременным женщинам.
 - Лицам, страдающим остеопорозом.
 - Лицам, имеющим нарушения кровообращения или тромбозы.
 - Лицам с кожными инфекциями.
 - Лицам, находящимся на лечении.
- Если повреждена упаковка или возникли неисправности, не используйте устройство и свяжитесь с местным торговым представителем или производителем.
- Не используйте устройство в местах с высокой температурой (вблизи нагревателей и радиаторов).
- Не применяйте крем для ног, когда используете устройство.
- Не занимайтесь самостоятельным устранением неполадок, для проведения ремонта свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Не встраивайте и не роняйте устройство.
- Не используйте в течение часа после приёма пищи.
- Не сматывайте электрический шнур слишком сильно, это может привести к повреждению шнура.
- Не ставьте на устройство тяжёлые вещи.
- Если произошли неполадки в работе, вытаскивайте электрический шнур из розетки и свяжитесь с сервисным центром.
- Не используйте в местах с повышенной влажностью (таких как спа, ванная или бассейн).
- Не используйте массажёр в качестве медицинского оборудования.
- Не применяйте для чистки растворители, такие как спирт или бензин.
- Держите вдали от детей.
- Прибор снабжен нагревательным элементом. Лицам, малочувствительным к теплу, необходимо быть более внимательными.

через сетевой фильтр во избежание преждевременных поломок.

3 Руководство пользователя

Комплектация массажера

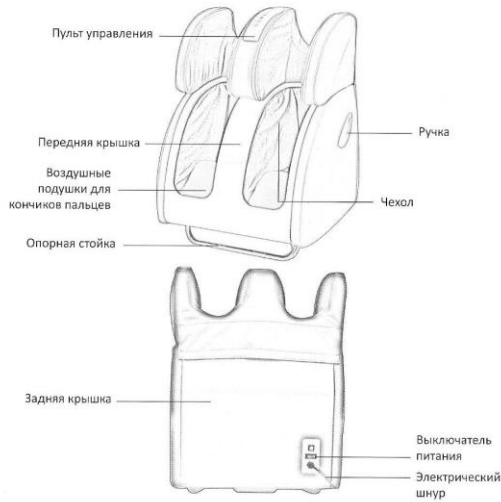

4

Руководство пользователя

Рекомендуем вам подключать электрическое оборудование

Характеристика товара

• Современный дизайн

Актуальный дизайн, цветовое разнообразие исполнения, легко вписывается в интерьер дома.

• Функция массажа давлением воздуха. Массажные ролики для подошв стоп

Устройство воспроизводит интенсивный и мягкий массаж путем давления воздуха. Снабжено специальными роликами для массажа подошв стоп с целью стимуляции акупунктурных точек. Вместе с воздушным массажем помогает добиться наилучшего эффекта.

• 3 уровня интенсивности и 5 программ предоставляют 17 различных комбинаций массажа

Вы можете комбинировать программу и желаемую интенсивность массажа для достижения наилучшего эффекта.

• Изменение угла спинки

Угол спинки может изменяться от 0 до 120 градусов, что позволяет выбрать в два раза большую область массажа.

• Инфракрасное излучение

Функция прогревания инфракрасным излучением позволяет прогреть мышцы, улучшить циркуляцию крови и обмен веществ.

• Снимаемые чехлы

Чехлы легко снимаются и моются.

• Безопасность

Воздушные подушки автоматически возвращаются в исходное положение в случае внезапного отключения электричества.

• Функции

Уменьшение отеков и тяжести в ногах, улучшение гибкости мышц, контуров ног, стимуляция кровообращения, облегчение боли после упражнений, стимуляция акупунктурных точек на стопах, снятие усталости и нормализация сна.

через сетевой фильтр во избежание преждевременных поломок.

Руководство пользователя

5


Инструкция по эксплуатации

1. Размещение устройства

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
Чтобы снизить шум от работы устройства, подстелите под него коврик.

2. Как включить питание

Включите вилку в розетку

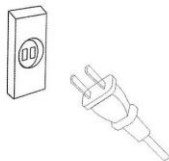


Обязательно убедитесь, что электрический шнур не повреждён.

Перед подключением к сети убедитесь, что кнопка «питание» отключена.

Не подсоединяйте и не выдёргивайте вилку влажными руками.

Способ использования

1. Перед началом использования поднимите опорную стойку.
2. Включите вилку в розетку.
3. Поверните выключатель на задней стороне массажера, загорится кнопка «Питание» на пульте управления.
4. Нажмите кнопку «Питание» на пульте управления для начала работы прибора.
5. Выберите желаемую программу для начала массажа.

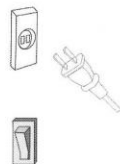

6

Руководство пользователя

Рекомендуем вам подключать электрическое оборудование

Способ использования

Инструкция к пульту управления

-
1. Функция обогрева
 2. Специальные ролики, предназначенные для массажа подошвы стоп
 3. Выбор программы массажа стоп
 4. Выбор программы массажа икр, коленей и бёдер
 5. Уровень интенсивности. Работа начинается с массажа 2-го уровня интенсивности. Интенсивность возрастает с уровня 1 до уровня 3
 6. Настройка программы автомассажа
 7. Выключатель

«Интенсивность» – иллюстрация кнопок



через сетевой фильтр во избежание преждевременных поломок.

Руководство пользователя

7

Снятие чехлов

Снятие верхнего слоя чехлов


1. Расстегнуть молнию чехлов
2. Протереть
3. Застегнуть молнию



Снятие чехлов следующего уровня


Как снять

1. Отсоединить липучку
2. Расстегнуть молнию
3. Извлечь чехлы

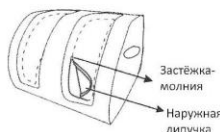

Как надеть

1. Крепко зафиксировать внутреннюю липучку
2. Застегнуть молнию
3. Крепко зафиксировать наружную липучку

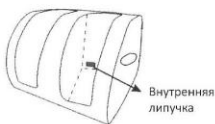

Иллюстрации



Схема массажа 1

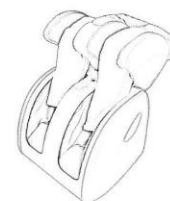


Схема массажа 2

Техническое обслуживание и хранение

1. Инструкция по техническому обслуживанию

Предупреждение

Выключите электропитание и вытащите вилку из розетки перед чисткой устройства. Для чистки загрязнённых участков, окуните кусочек мягкой ткани в тёплую мыльную воду, отожмите, подсушите и очистите загрязнённую поверхность. Дайте высохнуть, не вытирайте.

Примечание:

Рекомендуемое время использования 30 минут.

2. Хранение

- ▲ Храните устройство при следующих условиях:
 - Температура: 0°C – 40°C
 - Влажность воздуха: 30% – 85%

- ▲ Удалять пыль и загрязнения.

- Держать устройство чистым и вдали от мест с высокой влажностью.
- Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей или в местах с высокой температурой.
- Не хранить в местах с высоким содержанием коррозионно-активных газов.
- Не использовать в местах с высоким содержанием пыли, масел или смога.
- Не использовать вне помещений.

Устранение неполадок и спецификация

1. Устранение неполадок

Состояние	Проверка	Решение
Устройство работает неправильно	Вилка не плотно соединена с розеткой	Плотно соедините их.
	Переключатель питания выключен	Включите его.
После включения питания устройство не работает	Перегорел предохранитель	Вставьте зубочистку в маленькое отверстие предохранителя под кнопкой переключателя, выньте перегоревший предохранитель и замените его.
Громкий шум во время работы	Устройство работает длительное время без перерыва	Выключите питание и сделайте перерыв на 1 час.
Горячая поверхность	Устройство работает слишком долго	Выключите питание и сделайте перерыв на 30-60 минут.

Если после этого устройство по-прежнему работает неисправно или не работает, обратитесь в сервисный центр.

2. Спецификация

Массажёр для ног M-818	
Модель: RK-818	Масса/нетто: 17,5 кг
Напряжение: ~ 220 вольт	Частота: 50 Гц
Питание: 40 Вт	Установленный режим работы: 15 минут
Размер товара: (длина x ширина x высота)	52 x 42 x 63 см