

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, проверить работоспособность креплений. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Опора для стояния ОС-210.1. нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия на поверхности твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.




Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести к сокращению срока службы изделия.

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.

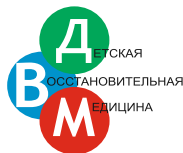


ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru

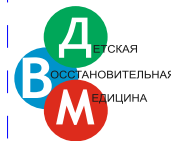

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Опора для стояния ОС-210.1.

арт. 210.1.01., арт. 210.1.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.



Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для стояния ОС-210.1. «Я Могу!» изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по тел. : (343) 383-11-96.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

Краткое описание и назначение

Принятие вертикального положения ребенком с ограниченными возможностями - это чрезвычайно важный элемент сложного процесса реабилитации. Опора для стояния - вертикализатор-стойка ОС-210.1.«Я Могу!» разработан для использования в процессе интенсивной и постоянной реабилитации детей, не имеющих возможности самостоятельно стоять и сидеть.

Основное предназначение детского вертикализатора стойки: пассивные реабилитационные мероприятия, направленные на адаптацию ребенка к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам. Опора применяется при патологических состояниях, когда пациент не имеет возможности стоять самостоятельно.

Деревянная рама, на металлической колесной основе с 4 колесами с тормозами, обеспечивающими возможность перемещения ребенка в вертикализаторе внутри помещения.


Крепления для стоп типа «сандалии», с жестким пяточным упором, с независимой регулировкой положения стоп (влево-вправо и вперед-назад), регулировкой расстояния между стопами.

Коленные крепления, регулируемые в 3 плоскостях - по высоте, глубине и ширине. Инновационная система крепления тела позволяет надежно закрепить ребенка в вертикализаторе. Бедренная и грудная обоймы, регулируемые по высоте, с боковыми упорами, регулируемые по ширине.

Опора для стояния ОС-210.1. укомплектована столиком для занятий и приема пищи, с бортиками, столик регулируется по высоте.




Решение по целесообразности использования изделия и периода вертикализации принимает лечащий врач.

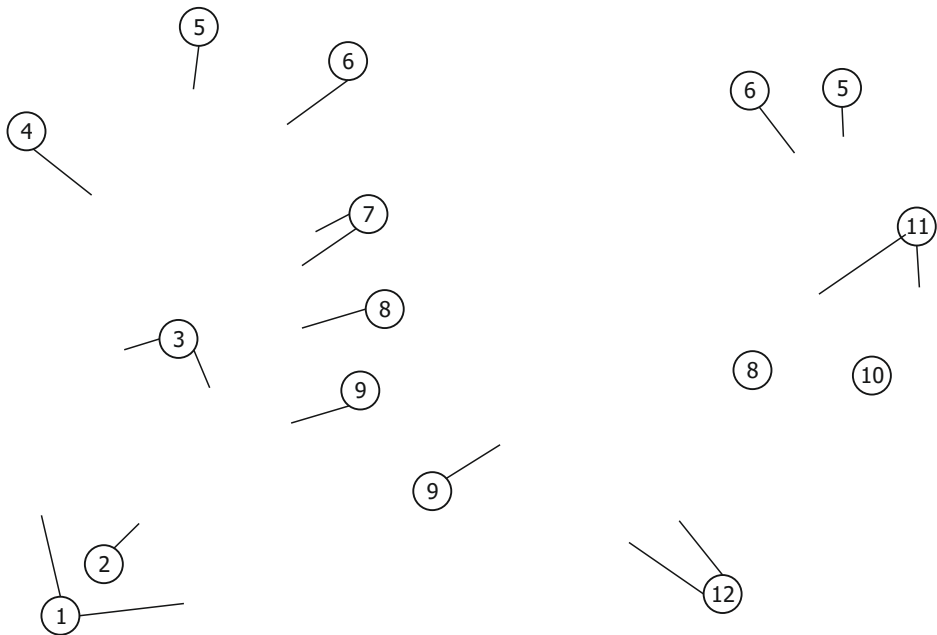



- 1 - металлическая колесная опора
- 2 - площадка для ступней с креплениями для стоп
- 3 - независимо регулируемые коленопоры
- 4 - столик, регулируемый по высоте
- 5 - грудная обойма
- 6 - грудные упоры-ограничители
- 7 - регулировка положения столика
- 8 - регулировка положения бедренной обоймы
- 9 - регулировка коленопор
- 10 - бедренная обойма

- 11 - бедренные упоры-ограничители
- 12 - крепления для стоп

 **Опора для стояния ОС-210 поставляется в собранном, готовом к эксплуатации виде. Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие.**

Опора для стояния ОС-210 предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры с находящимся внутри пациентом в помещениях с непрочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.

 **Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности использования изделия, ни в коем случае не используйте опору.**

 **В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя.**


Основные технические характеристики

Характеристика	210.1.01	210.1.02
Высота от пола до площадки для ступней, мм	110	110
Высота коленной обоймы, от площадки, см	160 - 475	370 - 650
Расстояние между коленями, мм	130 - 360	130 - 360
Высота бедренной обоймы, от площадки, см	360 - 600	530 - 830
Высота грудной обоймы, от площадки, мм	460 - 650	630 - 1320
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	800 x 650 x 950	800 x 650 x 1200


Подготовка и порядок эксплуатации

Не рекомендуется помещать ребенка на опору при выраженном беспокойстве или плаче. Необходимо успокоить ребенка. В большинстве случаев необходима дополнительная предварительная подготовка - массаж, растяжки. При наличии контрактур ноги ребенка необходимо зафиксировать ортезами. На ногах обязательно должна быть одета специальная ортопедическая обувь.

Установить опору на ровную поверхность (пол). Колеса зафиксировать тормозами. Открыть основание грудной и бедренной обойм («дверца»), выставить грудную и бедренную обоймы по ширине и высоте. Отрегулировать высоту столика. Отрегулировать глубину «дверцы». Расстегнуть ремни креплений для ступней. Расстегнуть ремни коленопор.

 **В целях обеспечения безопасности, закрепление ребенка в опоре для стояния производят 2 человека, один из которых удерживает ребенка, а второй производит закрепление.**

Удерживая ребенка в вертикальном положении, зафиксировать стопы в креплениях для стоп. Пятки должны упираться в пяточные упоры. Отрегулировать положение коленопор по высоте и положению. Зафиксировать коленные суставы в коленопорах крепежными ремнями. Подкорректировать высоту столика, высоту и ширину грудной и бедренной обойм, закрепить выбранное положение крепежными барашками. Осторожно закрыть «дверцу», слегка закрепить крепежным барашком. Точно выставить положения грудной и бедренной обойм, тщательно закрепить, после чего тщательно закрепить «дверцу» в закрытом состоянии.

 **ВНИМАНИЕ! Все манипуляции желательно производить под наблюдением обученного персонала. При высаживании ребенка необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача.**

